



CARATTERISTICHE

Classificazione	Pressodrenatore
Alimentazione	220/230, 50Hz
Classe di sicurezza	1 B
Protezione elettrica	2 x 2 A
Numero canali	8 settori pneumatici
Compressore	30 litri minuto
Pressione massima	3,5 atm
Regolazione	da 0 a 200mmHg
Timer digitale	da 1 a 99 minuti
Controllo	valore min.
Programmi di lavoro	N.12 memorizzati
Programmi di lavoro	N. 08
Scarico veloce	a fine trattamento

Esempio di programmi memorizzati


FISIOLOGICO

Fasi -----	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Settore 1						•	•	•	•							
Settore 2							•	•	•							
Settore 3								•	•							
Settore 4	•	•							•	•						
Settore 5		•	•							•	•					
Settore 6			•								•					
Settore 7					•									•		
Settore 8				•											•	

PICOTAGE

Fasi -----	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Settore 1						•	•	•								
Settore 2							•	•								
Settore 3									•							
Settore 4	•									•						
Settore 5		•									•					
Settore 6			•			•						•				
Settore 7				•										•		
Settore 8				•											•	

Lifepress

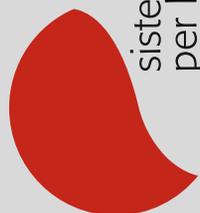

Lifemed

sistemi integrati
per l'estetica



Apparecchiatura compatta utilizzata per pressomassaggio peristaltico settoriale differenziale.

Genera un'onda peristaltica con pressioni differenti sulle varie zone da trattare in tempi determinati dal raggiungimento della pressione programmata nel singolo settore.

E' fornita con un sistema di gambali composto da 5 sezioni (piedi, gambe e ventriera) indipendenti.



pressoterapia